

CARE FLOW UB 2000A Einmalbettbeutel

Steriler Bettbeutel mit integriertem Zwillingshalter

Füllvolumen: 2000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Ein Rücksteckschlitz garantiert die sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	110 cm	04/04/2000/110/GHC	08871289

HMN: 15.25.06.3037

52




Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.

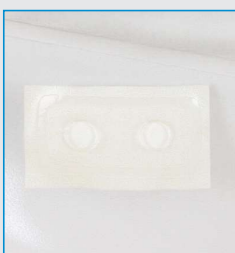

Belüftungsfilter

Ein bakterien- und flüssigkeitsdichter Belüftungsfilter sorgt für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 50 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen